



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

תודה שרכשתם מכשיר תוצרת חברת ד"ר גב.

**חברת ד"ר גב משקיעה מאמצים רבים בפיתוח מוצרים ארגונומיים
עם דגש על בריאות ונוחות.**

הגב שלכם בידיים טובות

חשבתם לאחרונה על השינה שלכם או הישיבה היום יומית? עבור רובנו, אלו פעולות שגרתיות שאנחנו עושים באופן אוטומטי, בלי לעצור ולחשוב עליהן לעומק. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן בד"ר גב, כדי לעשות את זה למענכם, מאז 1984. המוצר הראשון שפיתחנו היה מושב אורטופדי המסייע במניעה והקלה של כאבי גב. מאז, יצאנו לדרך ארוכה ומרתקת, במטרה לייצר מוצרים נוספים: מזרנים, כורסאות טלוויזיה ועיסוי, כסאות משרדיים, כריות שינה ותמיכה, מושבים ומכשירי עיסוי ועוד מוצרי בריאות ונוחות לגב שלכם. אגב, אותו מושב אורטופדי הפך למוצר אייקוני בענף, והוא נמכר עד היום בארץ ובעולם.

עשרות שנים של חקר המבנה האנטומי האנושי, של מאפייני השינה והישיבה בעידן המודרני, והקשבה לכם - הלקוחות שלנו, לימדו אותנו שאין אמת אחת. לכל אחד מכם צרכים שונים והעדפות ייחודיות. לכן, אנו מספקים מגוון רחב של פתרונות, לצד צוות מומחים המלווה אתכם עד להתאמה מושלמת של הדגם הנכון והנוח ביותר ובהתאם לתקציב שלכם. אנו מאמינים כי שינה טובה וישיבה נכונה הם צרכים הכרחיים לשמירת החיוניות של הגוף והנפש.

גם היום, אחרי עשרות שנות ניסיון ומוצרים שהוכיחו את עצמם במאות אלפי בתים בישראל, אנחנו ממשיכים להסתכל קדימה, לא מפסיקים ללמוד, להשתכלל ולעסוק ביצירת הטכנולוגיה הבאה. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ומתרגשים בכל פעם שלקוח מספר לנו עד כמה איכות חייו השתפרה בעקבות השימוש במוצרינו.

תודה גדולה על האמון והזכות למלא חלק כל כך חשוב בשגרת חייכם!



הגב שלך.
המומחיות שלנו.



הוראות הרכבה ותפעול כורסת עיסוי LEGACY AM-1020B

**קראו את המדריך למשתמש כדי שתוכלו להשתמש
במוצר בצורה הנכונה.
שמרו את המדריך לשימוש עתידי.**

הנחיות בטיחות חשובות

**בעת שימוש במוצרים חשמליים, במיוחד בנוכחות ילדים, יש להקפיד
תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:**

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.
- אנשים הלוקים בתנאים הבאים נדרשים להתייעץ עם הרופא שלהם לפני השימוש במוצר:
- אלו המשתמשים במכשיר אלקטרוני רפואי המוחדר בגוף, כגון קוצב לב.
- אלו הסובלים ממחלת לב.
- אלו הסובלים ממחלה בעמוד השדרה.
- אלו הסובלים משבר בעצם, במיוחד בעמוד השדרה.
- אנשים לאחר ניתוח.
- נשים בהריון, לאחר לידה או בתקופת המחזור.
- אלו הסובלים מגידולים ממאירים.
- אלו הסובלים מאוסטאופורוזיס.
- אלו הסובלים ממחלת עור או זיהום.
- אלו העוברים טיפול רפואי או שסבלו או מטופלים כעת כנגד בעיה פיזית כלשהי.
- אלו הסובלים מחריגה או עיוות כלשהו בגפיים או בעמוד השדרה.
- אלו הסובלים מבעיות בעמוד השדרה או פציעות עקב מחלה או תאונה.
- אין לאפשר למים לחדור למוצר או להתיז מים על פני המוצר.
- מגע מים בחשמל מסוכן. אין למקם את המוצר בסביבה לחה (כגון בחדר האמבטיה, בחדר המקלחת או ליד בריכת שחייה וכו').
- לפני חיבור המוצר לחשמל, וודאו שמתח המוצר ומתח האספקה זהים.
- אם התקע, כבל החשמל או המוצר עצמו פגומים, אין להשתמש במוצר.
- כדי למנוע סיכון להתחשמלות, אין לפתוח את המעטפת החיצונית של המוצר.
- אם המוצר או כבל החשמל ניזוקו, כדי למנוע סכנה, אל תנסו לתקן את המוצר בעצמכם. יש להבטיח את תיקון המוצר על ידי טכנאי מוכר, אחרת הערבות לאיכות המוצר תבוטל.
- אם נשמעים קולות או רעשים חריגים מהמוצר, כבו את המוצר ונתקו אותו מיד מהחשמל. צרו קשר עם המוכר או המשווק המורשה שלו.
- אין להשתמש במוצר אם הכיסוי פגום או אם ישנו כשל מכני או אלקטרוני. אנא צרו קשר עם המוכר המורשה.

- מקמו את המוצר אך ורק בהתאם להוראות שבמדריך למשתמש זה.
- אין להשתמש במוצר בסביבה לחה ובטמפרטורה גבוהה או ליד חפצים חמים כגון תנורי חימום ובישול.
- אין למרוח קרם רפואי או קוסמטי על המוצר או על גופכם לפני או בעת השימוש במוצר.
- בעת עיסוי סביב הצוואר או בסמוך לו, הקפידו על תנועת הגלילים והימנעו משימוש בעוצמה יתרה.
- אין לפגום, לכופף, למתוח, לסובב או לקשור את כבל החשמל. כבל חשמל פגום עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אין להשתמש במוצר זה על עור חשוף.
- זמן השימוש המומלץ לאדם הוא 30 דקות ביום.
- קיבולת המשקל המרבית היא 150 ק"ג. אם המשתמש שוקל מעל 150 ק"ג, ייגרם נזק קבוע למוצר.
- יש לשמור תמיד על ניקיון המוצר ולעולם אין להחדיר חפץ כלשהו בין הרווחים של המוצר.
- המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין לעמוד, לשבת או לקפוץ על משענת השוקיים כדי למנוע פציעה או נזק.
- אין לעמוד על משענת הגב או משענת היד כדי למנוע פגיעה ופציעה כלשהי.
- אנא הסירו את כל האביזרים שעל הגוף לפני השימוש.
- אין להשתמש במוצר בזמן שינה, תחת השפעת אלכוהול או עם חום גבוה.
- יש להימנע משימוש במוצר מיד לאחר האכילה. ולהמתין לפחות שעה לפני השימוש במוצר.


שדות אלקטרומגנטיים (EMF): מוצר OTO זה עומד בכל התקנים בנושא שדות אלקטרומגנטיים (EMF).



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

הכנה לשימוש


1. פריקת המוצר

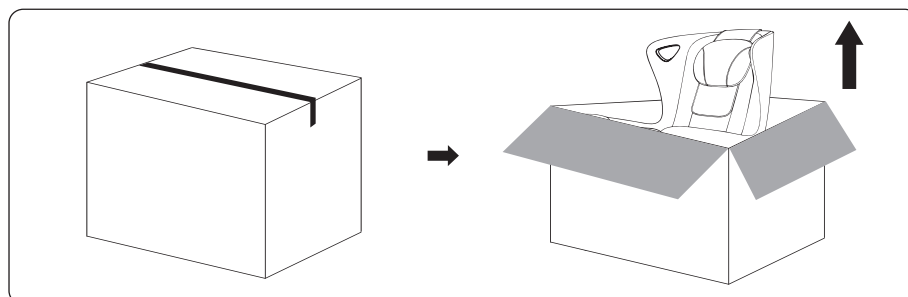

הוציאו את הגוף הראשי וכל האביזרים מהמארז

2. מיקום הכורסה

למניעת שריונות ברצפה או רעשים, אנו ממליצים להניח את הכורסה על גבי שטיח או שטיחון.
וודאו שאין כל חפץ מאחורי או לפני הכורסה. הרחיקו את הכורסה למרחק של 25 ס"מ מהקיר או מחפץ אחר.
מקמו את הכורסה במרחק של מטר אחד מהטלוויזיה או הרדיו כדי למנוע הפרעות בתדרי השידור.

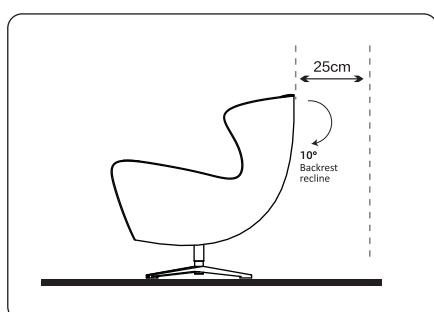


הערה:

יש להרחיק את הכבל מרגלי הכורסה



3. הזזת הכורסה

לחצו את משענת הגב כלפי מטה בשתי הידיים.
בעזרת אדם נוסף בחזית, הרימו את הכורסה יחדיו.

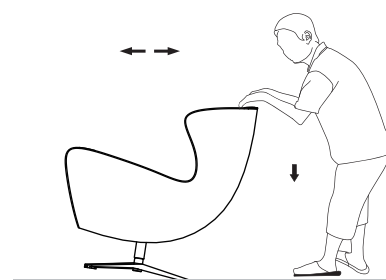

4. התקנת משענת הגב


הוציאו מהקופסה את גוף הכורסה, פין הלחיצה, רגלי הכורסה והדום.

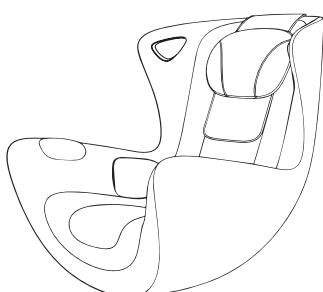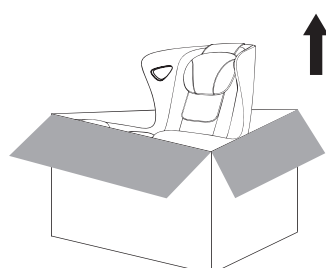

גוף הכורסה



פין לחיצה

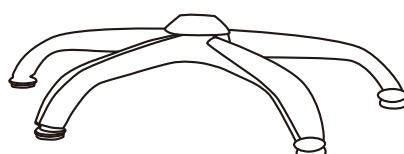


רגלי הכורסה




הגב שלך. המומחיות שלנו.



5. הכניסו את פין הלחיצה עד הסוף לתוך החור שברגלי הכורסה. 6. יישרו את החור שמתחת לגוף הכורסה למול קצה הפתיחה של פין הלחיצה ולחצו כלפי מטה בחוזקה. כעת ההתקנה הושלמה.

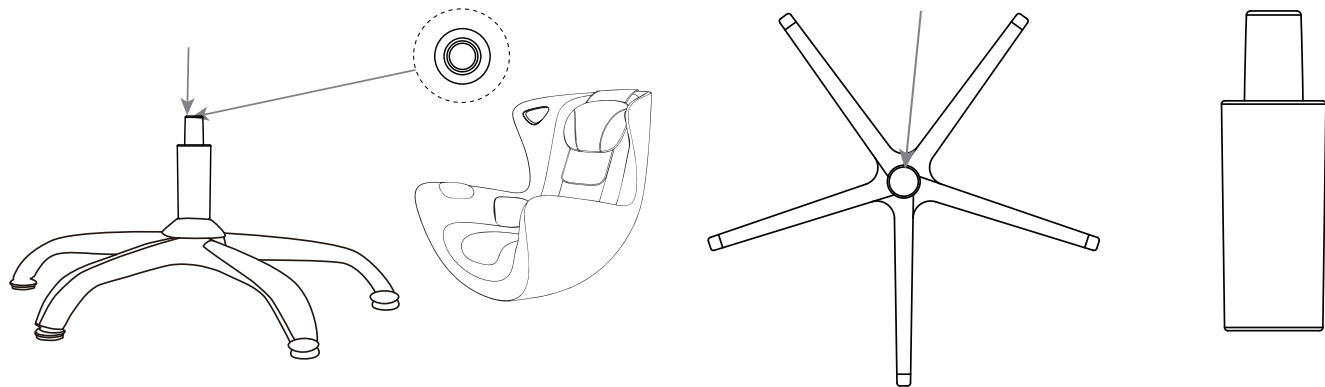

תיאור המוצר

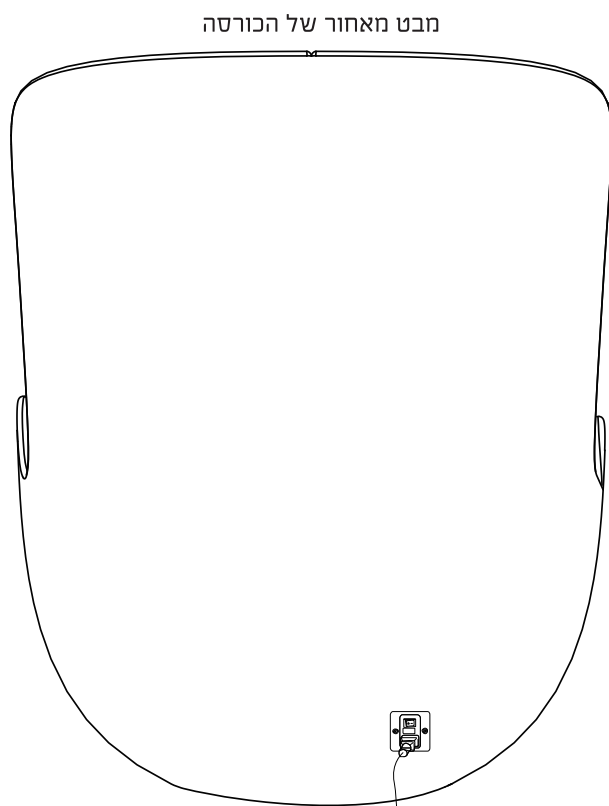


מבט מאחור של הכורסה

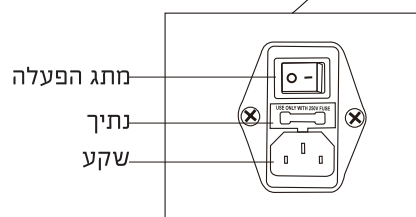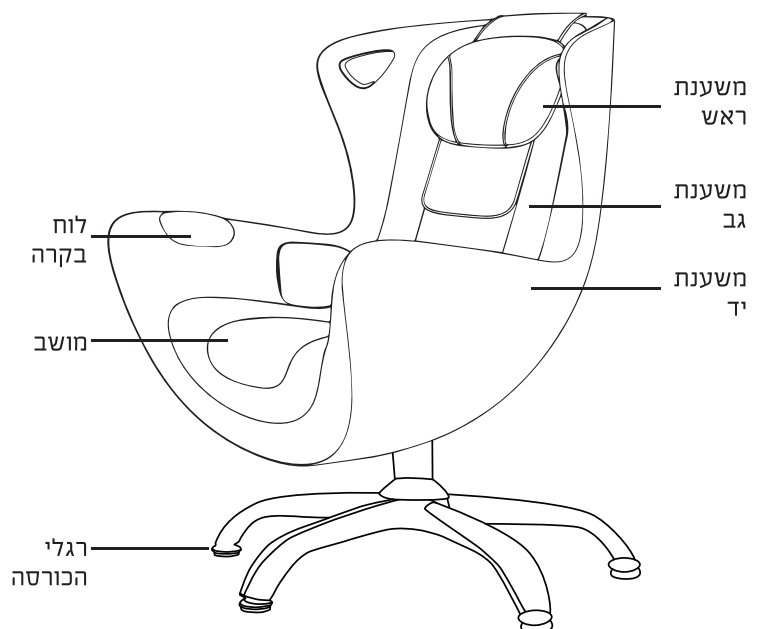



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

שלט רחוק

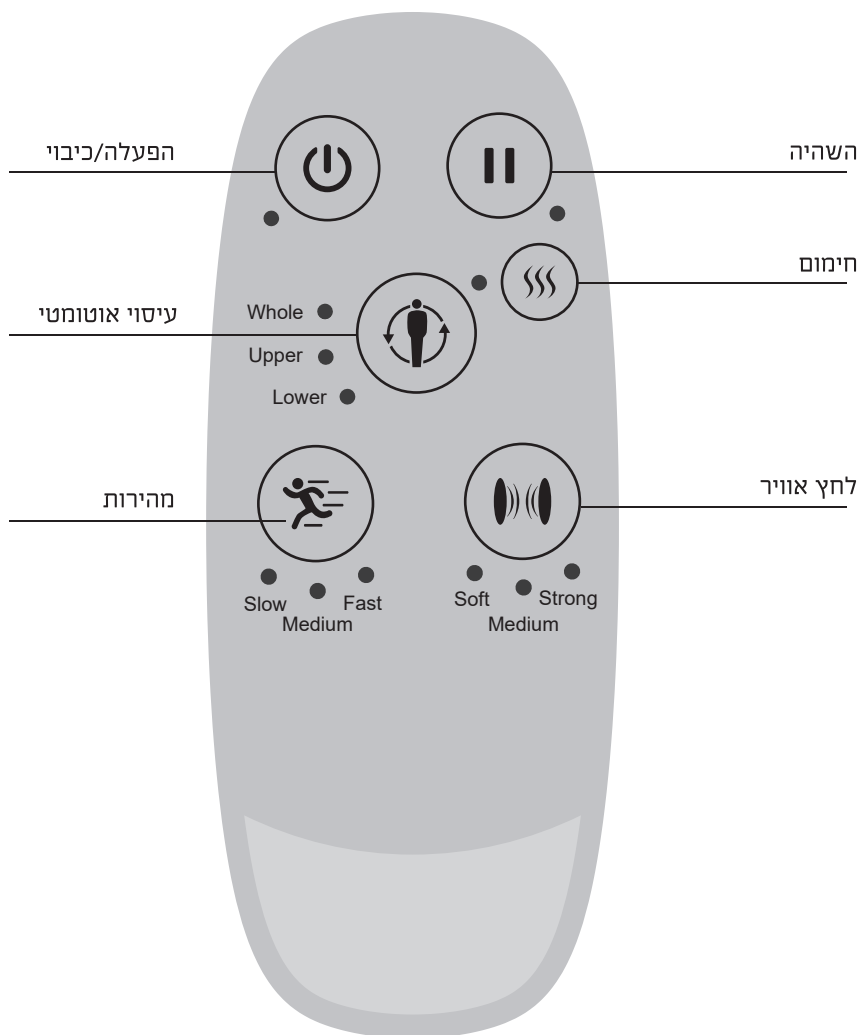

פונקציות השלט הרחוק

הפעלה/כיבוי
לחצו על לחצן זה, הכורסה נמצאת במצב המתנה; לחצו עליו שוב, כל הפונקציות מופסקות, והכורסה נכבית.



לחצן השהיה
לחצו על לחצן זה להשהיית כל פונקציות הכורסה וכניסה למצב מושהה.
לחצו על מקש זה שוב כדי להחזיר את הכורסה לתפקודה כפי שהיה לפני ההפסקה.



מקש חימום
לחצו כדי להפעיל/לכבות את פונקציית החימום.



לחצן מצב עיסוי אוטומטי
לחצו על מקש זה לעיסוי גוף מלא, עיסוי עליון, עיסוי תחתון, תוך שימוש באחת מתוך 3 תוכנית עיסוי אוטומטיות לבחירה.



התאמת מהירות העיסוי
לחצו על מקש זה כדי להתאים את המהירות, ישנן שלוש מהירויות להתאמה, איטית, בינונית, ומהירה.



כוונון מיקום כרית האוויר
לחצו על לחצן זה כדי לבחור את עוצמת כריות האוויר, יש שלוש רמות מתכוונות, חלש, בינוני וחזק.



הוראות הרכבה ותפעול לכורסת עיסוי LEGACY



פתרון תקלות

עמוד זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר בהם אתם עשויים להיתקל עם המוצר. אם אינכם מצליחים לפתור את התקלה באמצעות ההוראות להלן, אנא פנו למוכר או המשווקים המורשים שלו באופן מיידי.

תקלה	גורם אפשרי	פתרון
הכורסה לא מגיבה	הכורסה לא מחוברת כנדרש.	וודאו שהמתח מתאים למתח רשת החשמל המקומית ולאחר מכן חברו שוב.
	הכורסה סיימה את פרק הזמן המוקצב של 15 דקות של הטיימר האוטומטי ועברה אוטומטית למצב המתנה.	אם אתם רוצים לבצע הפעלה נוספת, לחצו שוב על הלחצן (C).
	ייתכן שהשתמשתם בכורסה ברציפות במשך יותר מ-45 דקות וההגנה נגד התחממות יתר הופעלה.	נתקו ואפשרו לכורסה להתקרר במשך 60 דקות לפני שימוש נוסף.
	עומס יתר הופעל על הכורסה.	הפחיתו את העומס המופרז והתחילו מחדש.
הכורסה חמה בצורה חריגה	ככל הנראה נעשה שימוש יתר בכורסה.	נתקו את המוצר והניחו לו להתקרר לפני שימוש נוסף.
נשמע צליל מכני מהכורסה	הצליל נובע מתנועה של חלקים מכניים.	זה מצב תקין. אין דבר נוסף לעשות.

טיפול ותחזוקה

- אין להשתמש בצמר פלדה, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים קורוזיביים (כגון בנזין או אצטון) לניקוי הכורסה.
- את כיסוי כורסת העיסוי מומלץ לנקות עם מנקה בקצף.
- אין להשתמש בבד ג'ינס או בד צבעוני לניגוב כדי למנוע העברת צבע על פני העור הסינטיטי.
- טווח הסיבוב ימינה ושמאלה של כורסת העיסוי הוא 120 מעלות.

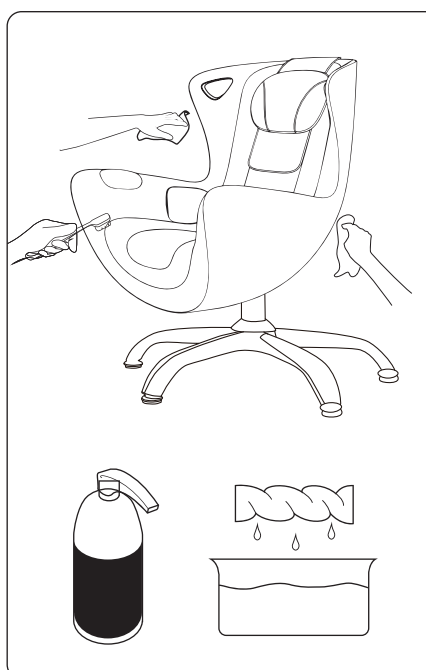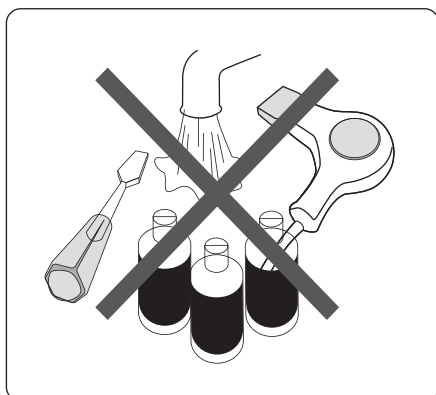



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

הוראות הרכבה ותפעול לכורסת עיסוי LEGACY

מפרט המוצר

שם המוצר	כורסת עיסוי
דגם	LEGACY AM-1020B
קלט הספק	100-240V ~ 50/60Hz
צריכת חשמל	50W
טיימר אוטומטי	20 דקות
מידות המוצר	975*668*980 מ"מ
מידות המארז	1010*705*860 מ"מ
גודל ההדום	480*400*530 מ"מ
משקל נטו/ברוטו	כ-35/43 ק"ג
הדום - נשיאת משקל	220 ק"ג
תקן בטיחות	GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008

שימו לב!

לכורסה יש בלוטות' שהסיסמה לו היא LEGACY.



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

תעודת אחריות

תודה שרכשת מוצר מתוצרת חברת ד"ר גב.

האחריות למוצר זה הינה לתקופה של שנה מיום רכישתו
ואינה תקפה עבור תקלות ונזקים שנגרמו ע"י שימוש לא נכון ו/או לא סביר.
האחריות הינה בתוקף כאשר היא מלווה במסמך המעיד על תאריך הרכישה.

חתימה וחתימת

מקום הרכישה

תאריך

קו הגב-מוקד המומחים
של ד"ר גב 03-9533111



משרדי הנהלה:

פארק לב הארץ, צומת קסם. תד 600, ראש העין, 48105 | טל. 03-9533111, פקס. 03-9511666 | dr-gav@dr-gav.co.il, www.dr-gav.co.il