

יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש.

שמרו את ההוראות לשימוש עתידי. לשימוש ביתי בלבד.

אמצעי בטיחות חשובים:

- בעת השימוש במוצרים אלקטרוניים, במיוחד בקרבת ילדים, יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות בסיסיים, לרבות באמצעים הבאים:
- יש להקפיד לנתק את המכשיר משקע החשמל מיד אחר השימוש ולפני הניקוי. כדי לנתק את המכשיר העבירו את כל הבקרים למצב כבוי ("OFF") ולאחר מכן הוציאו את התקע מהשקע.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לשקע החשמל. יש לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש או לפני חיבור או ניתוק של חלקים או של תוספות.
- מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל שמונה ומעלה ועל ידי אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות או אנשים חסרי ניסיון וידע, תחת פיקוח או אם ניתנו להם הוראות בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ואם הם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש. ניקיון ותחזוקת משתמש לא ייעשו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- אין לגעת במכשיר שנפל למים או לנוזל אחר. יש לנתק את זרם החשמל הראשי ולנתק את המכשיר מיד. יש לשמור על המכשיר יבש - אין להפעיל את המכשיר בתנאי רטיבות או לחות.
- אין להכניס סיכות או מהדקי מתכת אחרים למכשיר.
- יש להשתמש במכשיר בהתאם לייעודו כמתואר בהוראות הללו. אין להשתמש בתוספות שאינן מומלצות על ידי החברה.
- אין להפעיל את המכשיר אם כבל החשמל או תקע החשמל פגומים, אם אינו פועל כהלכה, אם נפל או ניזוק או אם נפל למים. יש להחזיר את המוצר לבדיקה ולתיקון במעבדת השירות של חברת ד"ר גב.

- יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים מחוממים.
- שימוש מופרז עלול לגרום להתחממות יתר של המכשיר ולקיצור חייו. במקרה של התחממות יתר הפסיקו את השימוש והניחו למכשיר להתקרר לפני הפעלתו מחדש.
- אין להכניס או להפיל חפץ זר לתוך המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר במקום שבו נעשה שימוש בתרסיסים או בחמצן.
- אין להפעיל את המכשיר תחת שמיכה. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר ולהתלקחות, להתחשמלות או לפציעה.
- אין לשאת את המכשיר מכבל החשמל או להשתמש בכבל החשמל בתור ידית נשיאה.
- אין להשתמש מחוץ לבית.
- מוצר זה דורש זרם חילופין של 220 וולט.
- אין לנסות ולתקן את המכשיר. המכשיר אינו כולל חלקים המיועדים לטיפול על ידי המשתמש.
- לקבלת שירות עבור המכשיר יש לשלוח אותו לבמעבדת השירות של חברת ד"ר גב. הטיפול במכשיר זה ייעשה רק על ידי אנשי שירות מוסמכים של חברת ד"ר גב.
- אין לחסום את פתחי האוויר של המכשיר או להניח את המכשיר על גבי משטח רך כגון מיטה או ספה. יש לשמור על פתחי האוויר נקיים ממוך, שיער וכדומה.
- אין להניח או לאחסן את המכשיר במקום שממנו הוא עלול ליפול או להימשך לתוך האמבטיה או הכיור. אין להניח את המכשיר במים או בנוזל אחר.
- אי מילוי ההוראות המפורטות לעיל עלול לגרום לסכנת אש או פציעה.
- שימוש לא נכון עלול לגרום לכוויות.

הוראות בטיחות:

- יש לקרוא חלק זה בקפידה לפני השימוש במכשיר.
- בכול מקרה של חשש בריאותי יש לפנות לרופא לפני השימוש במכשיר.
- על בעלי קוצב לב ונשים בהריון להימנע משימוש במוצר.

- לפני השימוש במכשיר. השימוש אינו מומלץ לחולי סכרת.
- אין להשתמש על תינוקות, על חולים או על אנשים ישנים או מחוסרי הכרה. אין להשתמש על עור קהה תחושה או על מי שסובל מבעיות במחזור הדם.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי מי שסובלים מכל בעיה פיזית שעלולה להגביל את יכולתם להפעיל את המכשיר או מי שסובלים מלקות חושית בפלג גופם התחתון.
- אין להשתמש ישירות על אזור נפוח או מודלק או על פצעים בעור.
- מכשיר זה אינו מכשיר מקצועי. הוא מיועד לשימוש אישי בלבד.
- אין להשתמש מעבר למשך הזמן המומלץ.
- יש לנקוט בזהירות בעת השימוש במשטחים מחוממים. אם המכשיר מרגיש חם מדי, נתקו אותו מהחשמל ופנו למרכז השירות של חברת ד"ר גב.
- המכשיר בעל משטח מתחמם. על אנשים שאינם רגישים לחום להיזהר בעת השימוש במכשיר.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש רפואי.
- יש להשתמש באמבט בשיבה בלבד. אין לעמוד על היחידה או בתוך יחידת האמבט.
- אין להשתמש בשעוות פראפין על גבי חתכים או פצעים פתוחים, יבלות, עור מודלק או במקרה של קהות תחושה בגפיים.
- יש לפנות לרופא לפני השימוש במכשיר בכל שאלה או דאגה בנוגע לדלקת חריפה, למחלת כלי דם היקפיים או לקהות תחושה בגפיים.
- אם שעוות הפראפין מרגישה חמה מדי או אינה מרגישה מספיק חמה, הפסיקו את השימוש והיוועצו ברופא. הדבר עלול להצביע על בעיה פיזית.
- הפסיקו את השימוש ופנו לרופא במקרה של דלקת עור, חוסר נוחות, גירוי או כאב בעקבות טיפולים חוזרים בפראפין.

- יש לבדוק את שעוות הפראפין על הצד הפנימי של פרק כף היד כדי לוודא כי הטמפרטורה נוחה.
- אין למלא את היחידה יתר על המידה. שמרו על מפלס שעוות הפראפין במרחק של כ-50 מ"מ משפת האמבט.
- אין להפעיל את היחידה ללא שעוות פראפין.
- אין להמיס שעוות פראפין באריזת הפלסטיק שלה, או להמיס שעוות פראפין מעל להבה, מעל גז בישול, בתנור או במיקרוגל.
- אין למזוג שעוות פראפין מומסת מתוך האמבט / היחידה.
- יש לנתק את היחידה לפני מילוייה בשעוות פראפין.
- אין להשתמש באביזרים או בשעווה שאינם מומלצים או נמכרים על ידי חברת ד"ר גב.
- במקרה של פגם בכבל האספקה, יש להחליפו במרכז השירות של חברת ד"ר גב.
- אין להכניס מים לאמבט / ליחידה.
- אין להוסיף שמן או כל תוסף אחר לשעוות הפראפין.

אזהרה!

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה יש להחליפו רק במעבדת השירות של חברת ד"ר גב. פני המכשיר חמים, אנשים שאינם רגישים לחום חייבים להיזהר בשימוש במכשיר. מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש.

אחריות מוגבלת לשנה!

מצ"ב תעודת אחריות מחב' ד"ר גב. תעודת אחריות זו למוצר הומדיקס אינה מכסה נזק שנגרם על ידי שימוש לא ראוי או שימוש פוגע, תאונה, הצמדה של אביזר כלשהו שאינו מורשה או הכנסת שינויים במוצר. כל שירותי התיקון של מוצר זה חייבים להתבצע ע"י מעבדת השירות של ד"ר גב.

שירות לקוחות בטל. 03-9533111
דואר אלקטרוני: drgav@dr-gav.co.il

תכונות המוצר:

שניות עד להתקשות השעווה. נסו להימנע מהזזת היד או המרפק בעת התקשות השעווה.
הערה: על תהליך הטבילה להיות מהיר. אין להשאיר את היד או את המרפק באמבט. אין להשרות את המרפק במהירות.

3. חזרו על שלב זה מספר פעמים עד לקבלת מספר שכבות; מספר השכבות המומלץ הוא 6 עד 10.

4. לחימום מתמשך הניחו שקית פלסטיק (מצורפת) על האזור המטופל



איור 4

וקפלו את פתח השקית. השאירו את שעוות הפראפין ואת השקית על גבי האזור המטופל במשך 10 עד 20 דקות לנוחות מרבית (איור 4).




איור 5

5. קלפו את השעווה מהאזור המטופל. אם השתמשם בשקית פלסטיק, הסירו את שקית הפלסטיק מהאזור המטופל. שעות הפראפין תתקלף ביחד עם השקית (איור 5).

6. השליכו את השעווה המשושמת.

הערה: אם אתם המשתמשים היחידים באמבט הפראפין, ניתן לעשות שימוש חוזר בשעווה. פשוט החזירו את השעווה לאמבט כדי להמיס אתה שוב.

***הערה:** כדי להימנע מכוויות הקפידו להכניס את השבכה לאמבט לפני הטבילה.

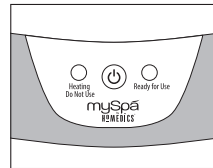


איור 2

5. חברו את היחידה לשקע חשמל ביתי של 220 וולט.
6. סגרו את המכסה הננעל. לחצו על לחצן ההפעלה.

נורת החימום תדלק באדום בעת המסת השעווה (איור 2). רוב שעות הפראפין תימס בתוך שעתיים.

7. נורת הכוונות תידלק לאחר שתימס רוב השעווה. במקרה הצורך, סגרו שוב את המכסה והניחו לשעווה הנותרת להימס במשך 15 דקות נוספות.

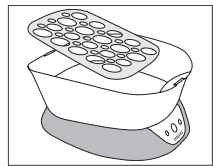

איור 3

8. פתחו את המכסה, הכניסו בזהירות את השבכה אל השעווה והניחו לה לשקוע לתחתית האמבט (איור 3). יחידת הטיפול בשעוות פראפין מיועדת לשימוש בטמפרטורת החדר. אם

השעווה מתחילה להתקשות, או אם נוצרים שבבים על פני השטח, סגרו את המכסה, לחצו על לחצן ההפעלה פעמיים והמתינו עד שתידלק נורת הכוונות.

הערה: טמפרטורת החדר עשויה להשפיע על ביצועי היחידה. לפיכך מומלץ לבדוק את טמפרטורת הפראפין על גבי צדו הפנימי של פרק כף היד לפני טבילת היד או המרפק.

הערה: אין לפתוח את המכסה ולטבול יד, רגל או מרפק כאשר נורת החימום מהבהבת.

הערה: יש להכניס את השבכה אל היחידה רק לאחר שנמסה שעוות הפראפין.

ניצוד להשתמש באמבט הפראפין

1. לפני טבילת היד או המרפק בדקו את שעות הפראפין על גבי צדו הפנימי של פרק כף היד כדי לוודא כי טמפרטורת השעווה נוחה. הסירו תכשיטים לפני השימוש (לדוגמה, טבעות, צמידים, שעון).

הערה: מומלץ לרחוץ את האזור המיועד לטיפול ולמרוח קרם ידיים מבוסס לנולין לפני טבילת האזור בשעוות פראפין. הדבר יאפשר להסיר את השעווה בקלות רבה יותר ויסייע בהענקת לחות לעור.

2. טבלו את יד, את המרפק או את כף הרגל בשעוות הפראפין המומסת והוציאו מיד. המתינו מספר



ניצוד להתקין את אמבט הפראפין


1. הוציאו את כל תוכן האריזה ובדקו כי ברשותכם כל הרכיבים הבאים של אמבט הטיפול בשעוות פראפין:

- אמבט פראפין בעל מכסה ננעל;
- שבכת פלסטיק;
- 3 שקיות שעוות פראפין;
- 20 שקיות פלסטיק.

2. הניחו את היחידה על שולחן או על משטח מישורי ויציב ופתחו את המכסה.

3. וודאו כי אמבט הפראפין ריק לפני הכנסת השעווה לאמבט.

4. פתחו את שקיות שעוות הפראפין והניחו את השעווה באמבט. פתחו מספר שקיות בכמות

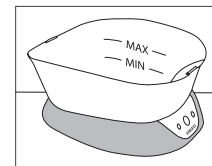

איור 1

הדרושה בלבד. היחידה מיועדת לשימוש עם עד 3 שקיות (כ-1.4 ק"ג) של שעוות פראפין מומסת ועם לפחות 2.5 שקיות (כ-1.1 ק"ג). יש לשמור על מפלס שעוות הפראפין בין רמות המינימום

והמקסימום המסומנות על דפנות האמבט (איור 1).

הוראות שימוש:

יחידה זו מבוקרת על ידי תרמוסטט. באפשרות היחידה להכיל עד 3 שקיות (כ-1.4 ק"ג) של שעוות פראפין לצורך הפעלתה. זמן ההמסה קצר משעתיים והיחידה מיועדת לפעול 24 שעות ביממה ללא הפסקה.

הערה חשובה: היחידה עשויה להרגיש חמה מאד לעור רגיש. אולם כדי ליהנות מיתרונותיה של שעוות פראפין חמה, יש להמיס את השעווה בטמפרטורה של 50 עד 55 מעלות צלזיוס. ליישום נכון טבלו את אזור הגוף במהירות (לדוגמה, ידיים או מרפקים) בשעוות הפראפין המומסת והוציאו מיד. המתינו מספר שניות להתקשות השעווה. יש לחזור על הפעולה 6 עד 10 פעמים. אין לטבול בשעווה במשך יותר משנייה אחת או שתיים. במקרה של רגישות רבה לחום או אם אתם סבורים כי המכשיר אינו בשבילכם, השיבו את המוצר למקום הרכישה לפני השימוש.