



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

**תודה שרכשתם מכשיר תוצרת חברת ד"ר גב.
חברת ד"ר גב משקיעה מאמצים רבים בפיתוח מוצרים ארגונומיים
עם דגש על בריאות ונוחות.**

הגב שלכם בידיים טובות

חשבתם לאחרונה על השינה שלכם או הישיבה היום יומית? עבור רובנו, אלו פעולות שגרתיות שאנחנו עושים באופן אוטומטי, בלי לעצור ולחשוב עליהן לעומק. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן בד"ר גב, כדי לעשות את זה למענכם, מאז 1984. המוצר הראשון שפיתחנו היה מושב אורטופדי המסייע במניעה והקלה של כאבי גב. מאז, יצאנו לדרך ארוכה ומרתקת, במטרה לייצר מוצרים נוספים: מזרנים, כורסאות טלוויזיה ועיסוי, כסאות משרדיים, כריות שינה ותמיכה, מושבים ומכשירי עיסוי ועוד מוצרי בריאות ונוחות לגב שלכם. אגב, אותו מושב אורטופדי הפך למוצר אייקוני בענף, והוא נמכר עד היום בארץ ובעולם.

עשרות שנים של חקר המבנה האנטומי האנושי, של מאפייני השינה והישיבה בעידן המודרני, והקשבה לכם - הלקוחות שלנו, לימדו אותנו שאין אמת אחת. לכל אחד מכם צרכים שונים והעדפות ייחודיות. לכן, אנו מספקים מגוון רחב של פתרונות, לצד צוות מומחים המלווה אתכם עד להתאמה מושלמת של הדגם הנכון והנוח ביותר ובהתאם לתקציב שלכם. אנו מאמינים כי שינה טובה וישיבה נכונה הם צרכים הכרחיים לשמירת החיוניות של הגוף והנפש.

גם היום, אחרי עשרות שנות ניסיון ומוצרים שהוכיחו את עצמם במאות אלפי בתים בישראל, אנחנו ממשיכים להסתכל קדימה, לא מפסיקים ללמוד, להשתכלל ולעסוק ביצירת הטכנולוגיה הבאה. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ומתרגשים בכל פעם שלקוח מספר לנו עד כמה איכות חייו השתפרה בעקבות השימוש במוצרינו.

תודה גדולה על האמון והזכות למלא חלק כל כך חשוב בשגרת חייכם!

מדריך למשתמש

כורסת עיסוי PRESTIGE

דגם: EC-1132A



קראו את המדריך למשתמש כדי שתוכלו להשתמש במוצר בצורה הנכונה.

שמרו את המדריך לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות

בעת השימוש בכורסת העיסוי, יש לנקוט תמיד באמצעי זהירות בסיסיים כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, כוויות, שריפה או פגיעה גופנית. אנא קראו את אמצעי הזהירות הבאים לפני השימוש בכורסת העיסוי.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה או אם הודרכו בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
- יש לפקח על ילדים ולוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו בכבל או מכלול מיוחד הזמינים מהיצרן או מנציג השירות שלו.
- השתמשו בספק 220-240V~, 50/60Hz. וודאו שתקע החשמל מחובר היטב לשקע חשמל תקין כדי להפחית את הסיכון לקצר חשמלי ושריפה.
- לאחר כל שימוש ולפני ניקוי, יש לסובב את מתג ההפעלה למצב "ס" ולנתק את כורסת העיסוי משקע החשמל.
- אין להשתמש בכורסת העיסוי באזורים בהם הלחות גבוהה, כגון סאונה או חדר אדים.
- אין להשתמש בכורסת העיסוי בחוץ ויש להימנע מאזורים עם אור שמש ישיר.
- אם יש הפסקת חשמל, כבו את מתג ההפעלה ונתקו את כורסת העיסוי משקע החשמל כדי למנוע נזק לכורסה כאשר החשמל יחובר שוב.
- לעולם אל תחברו/נתנתקו את כבל החשמל משקע החשמל בידים רטובות.
- אין להשתמש בכורסת העיסוי עם יותר מאדם אחד בו זמנית.
- כורסת העיסוי מיועדת לשימוש כמתואר במדריך ההוראות. אין להשתמש באביזרים אחרים מלבד אלו המומלצים.
- אין לנסות לעמוד או לשבת על משענת הגב או על משענת הרגליים כדי למנוע תאונה, פציעה או נזק לכורסה.
- יש לשמור תמיד על ניקיון כורסת העיסוי, ולעולם אין להכניס חפצים לתוך או סביב הרווחים של כורסת העיסוי.
- אין להזיז את כורסת העיסוי על ידי משיכת כבל החשמל.
- ודאו שאין ילדים, חיות מחמד או מכשולים אחרים מאחורי או מתחת לכורסת העיסוי.
- אין להשתמש בכורסת העיסוי במקומות בהם נעשה שימוש במוצרי תרסיס או במקומות בהם נעשה שימוש במתן חמצן.

אזהרה

- אנא התייעצו עם רופא אם יש לכם ספק האם עליכם להשתמש בכורסת עיסוי זו או לא.

- אין להשתמש בכורסת העיסוי יותר מ-30 דקות בכל פעם.
- אין לעסות איבר בודד במשך יותר מ-5 דקות.
- כורסת עיסוי זו אינה מוצר מקצועי, הכורסה נועדה לספק עיסוי נעים ומשחרר ולא מיועדת לשמש כתחליף לטיפול רפואי.

איסורים

- יש להיוועץ ברופא לפני שימוש בכורסת עיסוי אם את/ה בהריון או תחת טיפול רפואי כלשהו, בעת שימוש במכשיר אלקטרוני רפואי כגון קוצב לב, או כאשר סובלים מאחת מהתופעות הבאות: גידול ממאיר, מחלת לב, כאבי גב, עצם גב לא תקינה או עקומה, אוסטאופורוזיס או מחלה חריפה.
- אם אתם חווים כאב או כל תחושה פיזית חריגה בזמן השימוש בכורסת העיסוי, הפסיקו את השימוש בה מיד ופנו לרופא.
- לעולם אל תשתמשו בפונקציית העיסוי על אזורים נפוחים או מודלקים בגוף.

שימו לב!

משקל המשתמש מוגבל לרוב ל-100 ק"ג. במקרה של שימוש על ידי משתמש כבד מ-100 ק"ג, המוצר עשוי להשמיע רעש גדול יותר וריפוד הבד שלו עלול להישחק מהר יותר.



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

שימו לב!

- לפני הזזת הכורסה, אנא החזירו את משענת הרגליים למקומה המקורי. אחרת, עלולות להיגרם פציעות במהלך התנועה.
- אסור להזיז את כורסת העיסוי כאשר מישהו יושב עליה.
- בעת הזזת הכורסה, מומלץ להניח משטח קרטון או בד מתחת לכורסת העיסוי, מכיוון שתהליך ההזזה עלול לגרום לשריטות על משטח הרצפה.



הכנה לפני השימוש

1 בדקו את המרחב סביב המוצר

וודאו שאין כל אדם, חיות מחמד או חפץ אחר בקרבת המוצר.



2 גללו את כרית הגב וקבעו אותה בעזרת הרוכסן

גללו מעלה את כרית הגב וקבעו אותה לגוף הראשי באמצעות הרוכסן

כרית גב



3 וודאו שאין חומר זר תקוע בחיבורי חלקי המוצר

בעת בדיקת מקטע עיסוי כף הרגל/שוקיים, לחצו את משענת הרגליים קדימה בעזרת הידיים וודאו שאין חומר זר בקו החיבור/התפר.

זהירות!

- אין להכניס ידיים, אצבעות, רגליים או ראש לקווי החיבור שבין משענת הרגליים למשטח המושב או משענות היד.
- לפני הישיבה על המוצר, ודאו שאין חומר זר תקוע בין שני חלקים שלו.
- אין להניח חיות מחמד על המוצר.



חלקי הכורסה



התקנת כורסת העיסוי

1 לפני השימוש (מיקום התקנה)

- וודאו שיש מספיק מרחק מהקיר מאחור לצורך הטיית המוצר.
- אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר או למקום בעל טמפרטורה גבוהה (למשל, מול מכשירי חימום); אחרת הריפוד דמוי העור עלול לדהות או להתקשות.
- מומלץ להניח שטיחון מתחת למוצר כדי למנוע נזק לרצפה.
- השטיחון נדרש לכסות את אזור המגע של המוצר עם הרצפה ואת אזור משענת הרגליים הנמצא במגע עם הרצפה (מידות מינימליות 150x80 ס"מ). ראו את האזור.
- התקינו את המוצר בקרבת שקע חשמל.

29 ס"מ

כ-25 ס"מ



2 הוראות להזזת הכורסה

הטו את הכורסה לאחור כדי להזיז אותה בקלות ברחבי הבית.

- המוצר כבד לכן היו זהירים בעת הזזתו.
- משקל כורסת העיסוי - כ-45 ק"ג.
- הניחו את המוצר לאט ובזהירות כדי למנוע פגיעה ברגל.
- אל תשחררו את משענת הרגליים עד שהמוצר ממוקם אופקית, אחרת, משענת הרגליים תקפוצ חזרה למיקומה המקורי.



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

6 וודאו שגלגלי העיסוי חוזרים למיקום הראשוני שלהם



אם הם לא, לחצו ON בלחצן הפעלה כדי להחזיר אותם למצב זה.

7 וודאו שהבד אינו פגום או סדוק




האזור הנבדק:
בד החלקים הנעים
של גלגלי העיסוי על
גבי משענת הגב

אזהרה!

לפני השימוש, בדקו האם הבדים פגומים (גם אם הבד פגום מעט, יש להפסיק את השימוש במוצר מיד, להוציא את תקע החשמל ולשלוח את המוצר לתיקון).
אם נעשה שימוש במוצר עם בד פגום, אתם עלולים להיפצע או להתחשמל.

הוראות הפעלה

מתג הפעלה בחלק העליון של השלט

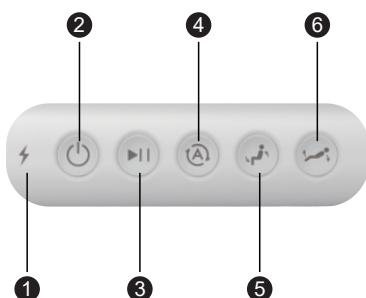

- 1 חיבור טעינה Type-C.
- 2 לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי.
- 3 לחיצה קצרה להשהיה/התחלה.
- 4 שלוש תוכניות עיסוי שונות, לחצו על הכפתור למעבר ברצף בין מצבי עיסוי שונים.
- 5 לחיצה ארוכה לכוונן זווית חופשי, לחיצה קצרה לאיפוס.
- 6 לחיצה ארוכה לכוונן זווית חופשי, לחיצה קצרה למצב אפס.

4 בדקו את תקינות הכבל ותקע החשמל


אזהרה

- הסירו לכלוך כגון אבק מתקע החשמל באופן תדיר.
- אחרת, עלולות להתרחש שריפות הנגרמות מבידוד לקוי עקב גורמים כמו לחות (נגבו את תקע החשמל במטלית יבשה).
- אל תגרמו נזק לכבל החשמל או לתקע החשמל. אין לפגום, לשנות, לכופף בכוח, לסובב או להאריך את כבל החשמל או תקע החשמל, ואין להניח את כבל החשמל או תקע החשמל קרוב לתנור, או לקשור או להצמיד חפצים כבדים לכבל או תקע החשמל. כבל או תקע חשמל פגומים עלולים לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי או שריפות.



מנעו סיבוך של כבל החשמל.

דחפו את התקע לשקע עד הסוף.


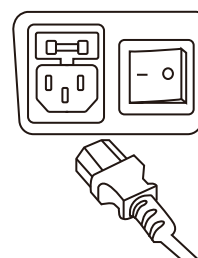


5 הפעילו את המוצר

1. הכניסו את תקע החשמל לשקע החשמל.
2. לחצו את מתג ההפעלה למצב הפעלה I.

אזהרה!

- הכניסו עד הסוף את תקע החשמל לשקע החשמל.
- יש להקפיד על התקנות בנוגע לשימוש בשקע ובמכשירי החיווט.
- השתמשו במקור מתח לפי התקן הישראלי:
220-240V, 50/60Hz
(אין להשתמש במוצר במדינה זרה או לחבר אותו לשנאי ללא אישור)
- אין להכניס או לשלוף את תקע החשמל בידיים רטובות, אחרת עלולה להתרחש התחשמלות.

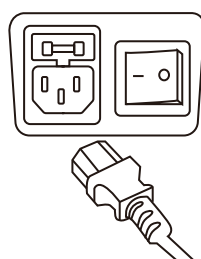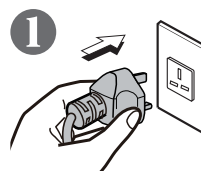


Bluetooth

הפעילו את פונקציית ה-Bluetooth של הטלפון הנייד כדי לקשר את שם ה-Bluetooth של כורסת העיסוי. קוד PIN של PRESTIGE: 9999.


מדריך התקנה (לשימוש המתקין של החברה)

1. פתחו את המארז והוציאו את הכורסה, הבסיס, הצייר המסתובב, הכרית, כבל החשמל והמדריך למשתמש.

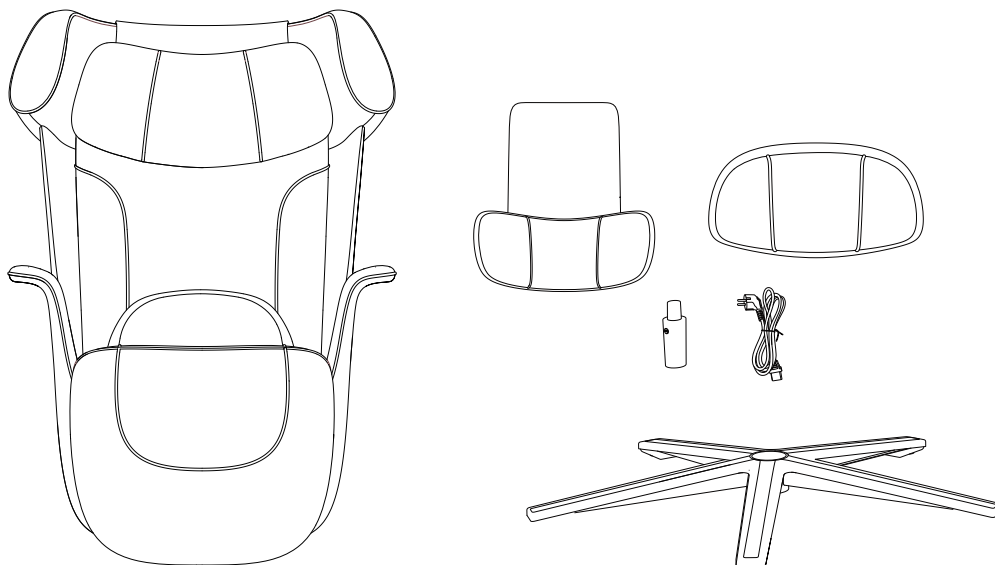

2. הניחו את הכורסה שכובה עם פניה כלפי מטה על גבי משטח רך. חברו את הצייר המסתובב לכורסה.

3. חברו את הבסיס לכורסה.

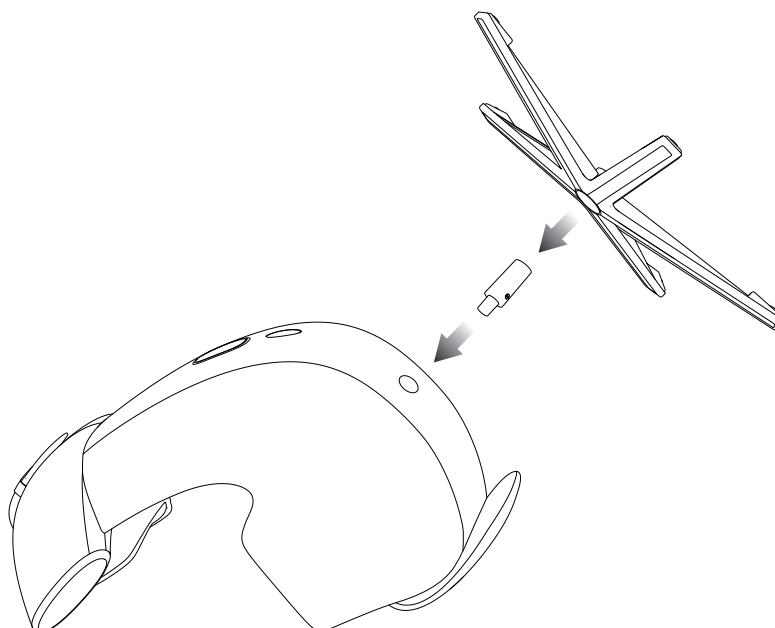




הגב שלך.
המומחיות שלנו.

4. מקמו את הכורסה במצב זקוף.

5. חברו את הכרית לראש הכורסה והניחו את כרית המותניים על המושב.

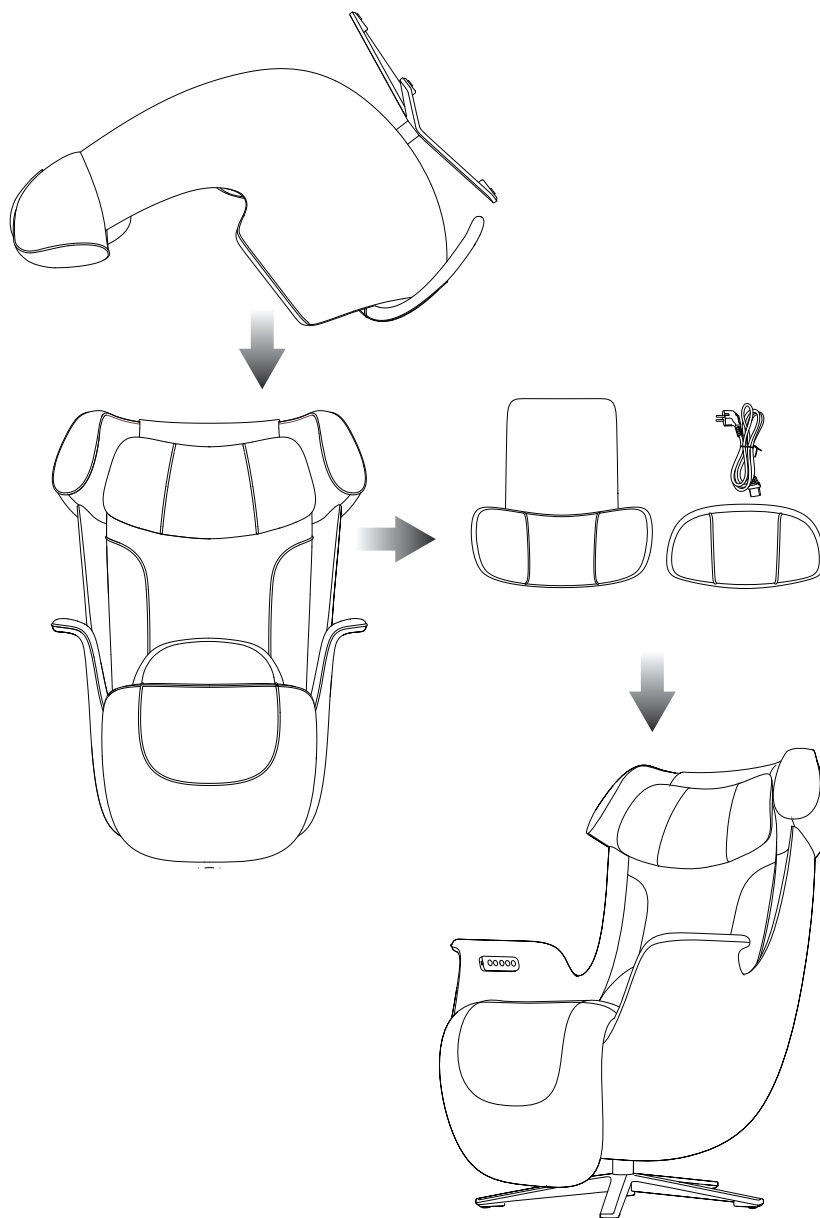

6. חברו את הכורסה לחשמל והפעילו אותה.



שאלות ותשובות

ש: האם אנשים המבקרים בבית החולים באופן תדיר עקב מחלות רשאים להשתמש במוצר?

ת: על אנשים אלו להתייעץ עם רופא לפני השימוש במוצר. העיסוי הוא מה שמכונה "גירוי מגע-לחץ": שרירים נדחסים כדי להקל את מתיחותם ולשפר את זרימת הדם. מחלות מסוימות עלולות להחמיר עקב עיסוי. לכן, יש להתייעץ עם רופא מטפל לפני השימוש במוצר.

ש: האם ישנם דברים הדורשים תשומת לב מיוחדת במהלך העברה?

ת: שימו לב לדברים הבאים במהלך העברה.

- כבו את מתג ההפעלה ונתקו את תקע החשמל מהשקע.
- אם קופסת האריזה המקורית אינה זמינה, ודאו שכבל החשמל אינו מלווה על המוצר, לפפו אותו והניחו אותו על משטח המושב. בעת העברת המוצר, יש למנוע מכבל החשמל ליפול ולהשתפשף על הקרקע.
- אם קופסת האריזה המקורית אינה זמינה, יש לשמור כראוי חומרי אריזה נוספים ולעטוף בהם את המוצר כדי למנוע שריטות ורעידות במהלך ההעברה.

ש: שימו לב לצלילים שהמוצר משמיע בעת השימוש בו.

ת: הם נגרמים על ידי מבנה הליבה.

ש: האם זה משנה האם לגלגלי העיסוי יש עוצמות עיסוי שונות?

ת: תופעה זו עשויה להתרחש במהלך עיסוי עקב מבנה הליבה.

כדי לדמות את אפקט העיסוי הטבעי ביותר, המוצר עוצב עם מבנה ליבה המאפשר עיסוי גב משתנה המבוצע על ידי גלגל עיסוי שמאלי וגלגל עיסוי ימני. במהלך העיסוי, ייתכן שגלגלי העיסוי יהיו במיקומים שונים מעט על הגב. זו הסיבה שאתם חווים את התחושה הזאת. זו לא תקלה.

ש: מה לגבי צריכת החשמל החודשית של המוצר?

ת: נניח שתבצעו עיסוי במשך 30 דקות פעמיים ביום (15 דקות בכל פעם), ייצרכו כ-1.0 קילוואט-שעה בכל חודש.

פונקציית טיימר

העיסוי יסתיים אוטומטית לאחר תום הזמן.

- מקטע עיסוי כף הרגל/שוק תחתונה יישאר במיקומו הסופי.
- גלגלי העיסוי ינועו למצבי התחלתי.
- משענת הגב לא תעלה אוטומטית.
- אם השלט כבוי, לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי, משענת הגב ומשענת הרגליים יחזרו למצבן המקורי.
- לאחר כל שימוש, וודאו שהעברתם את מתג ההפעלה למצב כבוי.

0.

ניקיון ותחזוקה

ניקוי הריפוד דמוי העור



- נגבו את הריפוד דמוי העור במטלית רכה ויבשה.
- אין לנקות את המוצר באמצעות כימיקלים כגון מדללים, בנזין ואלכוהול.
- בעת שימוש במוצר לטיפול בעור (מטלית ניקוי) הנמכר בשוק, יש לפעול לפי הוראות השימוש.
- אם הריפוד דמוי העור מלוכלך מאוד, נגבו אותו בשיטה שלהלן:
- טבלו מטלית רכה במים או במים חמים המכילים חומר ניקוי ניטרלי בריכוז 3% עד 5% וסחטו אותה.
- נגבו את פני הריפוד דמוי העור בעזרת המטלית הרכה.
- נגבו את חומר הניקוי במטלית רכה ולחה.
- יש לייבש את הריפוד דמוי העור באופן טבעי באוויר.
- אם יש קושי בהסרת הכתמים מהריפוד דמוי העור, יש להשרות ספוג מלמין בחומר ניקוי ניטרלי ולנגב את המוצר בעזרתו.
- אין לייבש את המשטח באמצעות מייבש שיער.
- ייתכן שפני הריפוד דמוי העור נצבעו בצבעי בד; לכן, יש להיזהר בעת ניגוב המוצר במטלית ג'ינס או במטלית צבעונית.
- יש להרחיק מקומות אלו ממגע ממושך עם פלסטיק כדי למנוע דהייה.
- הריפוד דמוי העור עלול לדהות, לכן יש לכסות במגבת את האזור שבא במגע עם צבע שיער.

ניקוי חלקי הפלסטיק

- טבלו מטלית רכה במים או בחומר ניקוי ניטרלי המכיל מים חמים, סחטו אותה ונגבו את חלקי הפלסטיק.
- אין לנקות את המוצר באמצעות כימיקלים כגון מדללים, בנזין ואלכוהול.
- נגבו בפיסת בד לחה.
- סחטו את המטלית לפני השימוש בה לניגוב השלט.
- יש לייבש את חלקי הפלסטיק באופן טבעי באוויר.



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

פתרון תקלות

תקלה	גורם ופתרון
גלגלי העיסוי נעצרים במהלך השימוש (המוצר מצפצף וכל הסמלים והכפתורים בשלט הרחוק מהבהבים ואז כבים)	מטעמי בטיחות, גלגלי העיסוי עלולים להיעצר עקב כוח חיצוני גדול מדי במהלך השימוש. אם כל הסימנים והכפתורים בשלט הרחוק מתחילים להבהב, זה מצביע על בעיה קיצונית. במקרה זה, כבו את מתג ההפעלה והפעילו מחדש כ-10 שניות לאחר מכן. אם גלגלי העיסוי נעצרים שוב, התאימו את תנוחת הישיבה שלכם ואל תישענו באופן מלא על משענת הגב. (משתמשים, במיוחד אלו שמקלם מעל 100 ק"ג, צריכים לנקוט באמצעי זהירות רלוונטיים)
לא ניתן להטות את המוצר, או שלא ניתן להרים או להוריד את משענת הרגליים (המוצר מצפצף, נורית ההפעלה בשלט הרחוק נכבית והמוצר נעצר)	מטעמי בטיחות, המוצר יעצור במקרה של חסימה או הפעלת כוח חזק מדי. אם כל התכנים והכפתורים מהבהבים ומשענת הגב או משענת הרגליים נעצרו, כבו את ספק הכוח, הפעילו אותו מחדש כ-10 שניות לאחר מכן ולאחר מכן הפעילו את המוצר.
גלגלי העיסוי אינם מגיעים לכתפיים או לצוואר	אם הראש אינו במגע עם משענת הראש, או אם הגב אינו במגע עם משענת הגב, מיקום הכתף בזיהוי מבנה הגוף יהיה כנראה נמוך יותר מהמיקום בפועל. שבו עמוק ככל הניתן במוצר, השעינו את ראשכם על משענת הראש והפעילו מחדש מההתחלה.
לגלגלי העיסוי השמאליים והימניים יש רמות (עוצמות) שונות	זו אינה תקלה אלא תופעה רגילה מכיוון שהמוצר מצויד בליבת עיסוי המאפשרת פעימות מתחלפות של גלגלי העיסוי.
המוצר לא יכול לפעול כלל. • עיסוי פלג גוף עליון (מהצוואר ועד המותניים) • עיסוי רגל תחתונה/כף רגל	• כבל החשמל מנותק. • מתג ההפעלה אינו מופעל. • לא נבחרה תוכנית לאחר לחיצה על כפתור ההפעלה בשלט רחוק.
המוצר פגום	למניעת תאונות, פנו למרכז שירות מורשה.
כבל או תקע החשמל מתחממים בצורה חריגה.	
אין תחושת חום	• כפתור החימום מוגדר למצב כבוי. • רק הבדים שבמיקום קצות האצבעות חמים. תחושת החמימות תלויה בגורמים כגון סוג הגוף, שיטת העיסוי, הבגדים וטמפרטורת החדר. כאשר חלק עיסוי כף הרגל מורם, חלק החימום נמצא במגע הדוק עם כף הרגל ויוצר תחושת חמימות.
המוצר לא יכול להתקרב גם אם פונקציית הטמפרטורה מושבתת	• בשל מבנה גוף החימום, המוצר ממשיך להרגיש חמים במשך זמן קצר לאחר החימום בגלל חום שיורי. • אם מתבצע עיסוי מתמשך של איבר בודד, גם לאחר כיבוי פונקציית החימום, תרגישו עלייה מתמשכת בתחושת החום.

אם הפתרונות הנ"ל אינם רלוונטיים, אנא צרו קשר עם מרכז השירות של ד"ר גב.

הצלילים והתחושות שחשובים בעת השימוש במוצר

אתם עשויים לשמוע או לחוות את הצלילים או התחושות להלן בעת השימוש במוצר. לא מדובר בתופעות חריגות, אלא בתוצאות של מבנה המוצר.

- צליל כאשר עיסוי המתיחה חוזר למיקום הראשוני
- צליל ובדיקה כאשר גלגלי העיסוי משפשפים את הבד
- צליל תנועות כגון לישה ונקישות
- צליל חיכוך של גלגלי עיסוי פועלים
- צליל תנועה כלפי מעלה
- צליל רצועת ההינע
- צליל מנוע
- צליל גלגלי העיסוי הלוחצים כשהם מתחילים להימתח
- צליל כאשר אדם יושב על המושב
- רעש חיכוך בין משענות היד לכרית הגב כאשר משענת הגב מוטה
- צליל חיכוך בין גלגלי העיסוי לבד
- צליל משאבת הניפוח במהלך עיסוי כרית האוויר
- צליל פליטת אוויר במהלך עיסוי כרית האוויר



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

- צליל פעולה של שסתום הסולנואיד בתחתית המוצר במהלך עיסוי כרית האוויר
- משענת הרגליים מתנדנדת
- צליל כאשר הכתפיים נמתחות או מוזזות
- צליל הנעת כריות האוויר
- צליל החלקה של מקטע עיסוי כף הרגל
- רעש חיכוך בין כרית הגב לעור כיסוי הגב כאשר משענת הגב מוטה

אם הצליל חזק, ייתכן גם שמדובר בתקלה במוצר.
במקרה זה, יש לבדוק ולתקן את המוצר על ידי שירות הלקוחות.

אזהרה!

אין להתקין, לפרק או לתקן את המוצר ללא אישור.

אזהרה!

במקרה של תקלה או בעיה חריגה כלשהי, יש להפסיק את פעולת המוצר מיד ולהוציא את תקע החשמל כדי למנוע, שריפות והתחשמלות. דוגמאות לתופעות חריגות ותקלות:

- המוצר אינו פועל לאחר העברת מתג ההפעלה למצב מופעל ON.
 - לאחר הזזת כבל החשמל, המוצר מופעל באופן לא רצוי.
 - במהלך השימוש, המוצר מדיף ריח שרוף או רעש חריג.
 - המוצר מתעוות או מתחמם בצורה חריגה.
- אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

מפרט

מידע Bluetooth	PRESTIGE EC-1132A סיסמה: 9999
שם המוצר	PRESTIGE
דגם מוצר	EC-1132A
ספק כוח	220-240V, 50-60Hz
צריכת חשמל	70W
טווח עיסוי (מעלה-מטה)	כ-90 ס"מ ± 5%
טווח עיסוי (שמאל-ימין)	מרווח גלגלי העיסוי (כולל רוחב גלגלי העיסוי) במהלך השימוש במוצר מרווח גלגלי העיסוי (כולל רוחב גלגלי העיסוי) במהלך גלילה על הגב ותנועה מעלה-מטה: כ-5 ס"מ ~ 20 ס"מ
מהירות העיסוי	לישה: כ-27 פעמים לדקה. כ-35 פעמים לדקה. הקשה: כ-160 פעמים לדקה. כ-240 פעמים/דקה. (צד אחד) מהירות תנועה: כ-19 ס"מ/שנייה ± 10%
זווית הטיה	כ-98°~120°
כיבוי אוטומטי	כ-15 דקות
מידות (גובה x רוחב x אורך)	ניצב כ-117 x 78 x 88 ס"מ
	נטוי: כ-103 x 78 x 134.5 ס"מ
משקל	כ-46 ק"ג (כולל אריזה: כ-57.5 ק"ג)
מידות המארז (גובה x רוחב x אורך)	כ-119 x 77.5 x 88.5 ס"מ
משקל גוף מרבית מומלץ של המשתמש	100 ק"ג

עבור משתמש שמשקלו עולה על 100 קילוגרם, המוצר עשוי להשמיע רעשים ומארז הבד שלו עלול להישחק מהר יותר.



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

תעודת אחריות

תודה שרכשת מוצר מתוצרת חברת ד"ר גב.

האחריות למוצר זה הינה לתקופה של שנה מיום רכישתו
ואינה תקפה עבור תקלות ונזקים שנגרמו ע"י שימוש לא נכון ו/או לא סביר.
האחריות הינה בתוקף כאשר היא מלווה במסמך המעיד על תאריך הרכישה.

חתימה וחותמת

מקום הרכישה

תאריך

קו הגב-מוקד המומחים
של ד"ר גב 03-9533111



משרדי הנהלה:

פארק לב הארץ, צומת קסם. תד 600, ראש העין, 48105 | טל. 03-9533111, פקס 03-9511666 | drgav@dr-gav.co.il, www.dr-gav.co.il