



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

תודה שרכשתם מכשיר תוצרת חברת ד"ר גב.

**חברת ד"ר גב משקיעה מאמצים רבים בפיתוח מוצרים ארגונומיים
עם דגש על בריאות ונוחות.**

הגב שלכם בידיים טובות

חשבתם לאחרונה על השינה שלכם או הישיבה היום יומית? עבור רובנו, אלו פעולות שגרתיות שאנחנו עושים באופן אוטומטי, בלי לעצור ולחשוב עליהן לעומק. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן בד"ר גב, כדי לעשות את זה למענכם, מאז 1984. המוצר הראשון שפיתחנו היה מושב אורטופדי המסייע במניעה והקלה של כאבי גב. מאז, יצאנו לדרך ארוכה ומרתקת, במטרה לייצר מוצרים נוספים: מזרנים, כורסאות טלוויזיה ועיסוי, כסאות משרדיים, כריות שינה ותמיכה, מושבים ומכשירי עיסוי ועוד מוצרי בריאות ונוחות לגב שלכם. אגב, אותו מושב אורטופדי הפך למוצר אייקוני בענף, והוא נמכר עד היום בארץ ובעולם.


עשרות שנים של חקר המבנה האנטומי האנושי, של מאפייני השינה והישיבה בעידן המודרני, והקשבה לכם - הלקוחות שלנו, לימדו אותנו שאין אמת אחת. לכל אחד מכם צרכים שונים והעדפות ייחודיות. לכן, אנו מספקים מגוון רחב של פתרונות, לצד צוות מומחים המלווה אתכם עד להתאמה מושלמת של הדגם הנכון והנוח ביותר ובהתאם לתקציב שלכם. אנו מאמינים כי שינה טובה וישיבה נכונה הם צרכים הכרחיים לשמירת החיוניות של הגוף והנפש.

גם היום, אחרי עשרות שנות ניסיון ומוצרים שהוכיחו את עצמם במאות אלפי בתים בישראל, אנחנו ממשיכים להסתכל קדימה, לא מפסיקים ללמוד, להשתכלל ולעסוק ביצירת הטכנולוגיה הבאה. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ומתרגשים בכל פעם שלקוח מספר לנו עד כמה איכות חייו השתפרה בעקבות השימוש במוצרינו.

תודה גדולה על האמון והזכות למלא חלק כל כך חשוב בשגרת חייכם!



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

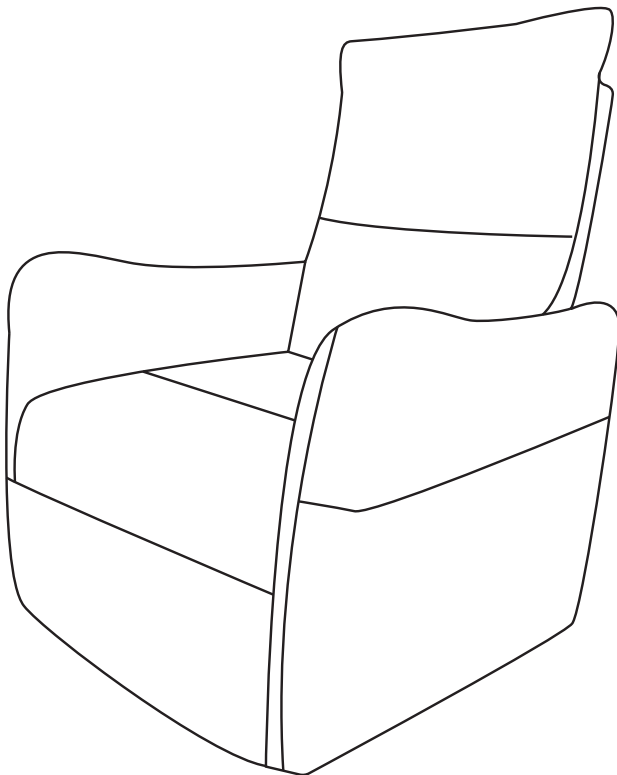

הוראות הרכבה ותפעול כורסת עיסוי SUPERSTAR AM-2015B

**קראו את המדריך למשתמש כדי שתוכלו להשתמש
במוצר בצורה הנכונה.
שמרו את המדריך לשימוש עתידי.**

הנחיות בטיחות חשובות

אנא קראו את כל ההוראות לפני השימוש

על כורסת העיסוי להיות מצוידת בשקע שתואם לתקע. הארקה שגויה עלולה לגרום להתחשמלות. אנא אל תחליפו את התקע בתקע/שקע לא מאושר, הקפידו לבצע את הבדיקה עם גורם מקצועי טכני. בעת שימוש במוצרים חשמליים, למניעת התחשמלות, כוויות, שריפה או פציעה, יש להקפיד על אמצעי זהירות בסיסיים, לרבות:

- הקפידו להשתמש בשקע שתואם לתקע.
- וודאו תמיד שהתקע מוכנס במלואו לשקע כדי להפחית את הסכנה של קצר חשמלי או שריפה.
- הקפידו לנתק את התקע כנדרש לאחר השימוש או לפני ניקוי.
- אין להשתמש במוצר זה בטמפרטורה גבוהה.
- אין לאחסן או להשתמש במוצר זה בחוץ או באור שמש ישיר.
- במקרה של הפסקת חשמל פתאומית במהלך השימוש, אנא העבירו תמיד את המתג למצב "0", והוציאו את התקע כדי למנוע נזק למוצר.
- אין להפעיל את כורסת העיסוי אם הכבל רטוב או פגום.
- אין להכניס ולנתק את התקע בידיים רטובות כדי למנוע תאונות.
- כאשר ילדים, נכים, מוגבלי ניידות שוהים בקרבת כורסת העיסוי או משתמשים בה, יש צורך בהשגחה.
- ניתן להשתמש במוצר זה אך ורק למטרה המצוינת במדריך זה.
- אין לעמוד, לשבת או לקפוץ על מתלה הקרסול כדי למנוע פציעה.
- אל תנסו לשבת על משענת היד או משענת הגב, כדי לא להטות את כורסת העיסוי, וכתוצאה מכך לגרום לתאונה.
- אין להירדם במהלך העיסוי.
- אנא שמרו תמיד על כורסת העיסוי נקייה והימנעו מהחדרת חפצים לתוך רווחי כורסת העיסוי.
- אל תזיזו את כורסת העיסוי על ידי משיכת כבל החשמל ישירות.
- אנא בדקו לאיתור סדקים חריגים בציפוי גב כורסת העיסוי לפני כל שימוש. במקרה של תקלה כלשהי, אל תשתמשו במכשיר ופנו למרכז השירות לצרכן של הספק.
- מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- התייעצו עם רופא אם אינכם בטוחים האם אתם רשאים להשתמש בכורסת העיסוי.
- כדי למנוע אי נוחות או פציעה הנגרמת משימוש בכורסת עיסוי זו, המשתמשים הבאים נדרשים להתייעץ עם רופא לפני השימוש במוצר זה: חולים עם גידולים ממאירים, מחלות לב, נשים בהריון, נשים לפני לידה או נשים במחזור, אלו הזקוקים למנוחה, אלו המקבלים מקבלים טיפול, אלו עם מחלות גב, אי בעיות בחוליות הצוואר.
- אם אתם חשים כאב במהלך השימוש, אנא הפסיקו את השימוש מיידית. אם נפצעתם במהלך השימוש, אנא פנו מיד לייעוץ רפואי.
- אין לעסות עור אדום או דלקתי.
- מוצר זה מיועד לשימוש משפחתי בלבד למטרות הנאה ועיסוי,

ואינו מהווה ציוד רפואי לעיסוי מקצועי, ולכן לא יכול להחליף טיפול מקצועי.

- מומלץ להפעיל את כורסת העיסוי למשך 30 דקות כל יום, אין לעסות את אותו חלק במשך יותר מ-15 דקות. עיסוי מוגזם יוביל לתוצאה בלתי מועילה, ושימוש ממושך יוביל להתחממות יתר של כורסת העיסוי ויקצר את חיי השירות של המוצר.
- אין להשתמש במוצר זה בסביבה של הזרקת גז או אספקת חמצן. מוצר זה אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 12.

שימו לב


- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו בכבל ייעודי או רכיב ייעודי שנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות שלו.
- פני השטח של המכשיר חמים. אנשים חסרי רגישות לחום נדרשים להיזהר בעת השימוש במכשיר.
- אין להשתמש במכשיר במתחים שאינם תואמים את מפרט המכשיר.
- מוצר זה יש לחבר לשקע עם שלושה חיבורים שכולל חיבור הארקה למערכת הארקה אמינה ותקינה.
- יש להחליף את כיסוי העור או הבד שניזוק בזמן ולא להשתמש במכשיר, למניעת פציעה אישית.
- אין להכניס את הפקד הידני למים או להרטיבו כדי שלא לגרום לתקלת שליטה.



הגב שלך.
המומחיות שלנו.


הכנות והוראות לפני השימוש

1. פרקו את האריזה והוציאו את האביזרים

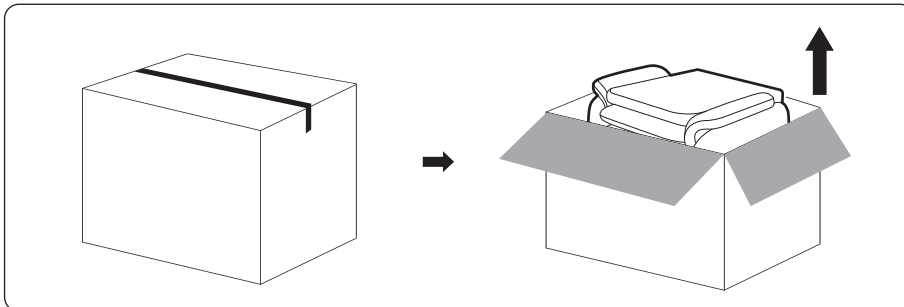

- הסירו את סרט האריזה מהמארז החיצוני של הגוף הראשי של כורסת העיסוי, הרימו והסירו את המארז החיצוני.
- הוציאו את האביזרים והניחו אותם בצד.

2. מקמו את כורסת העיסוי

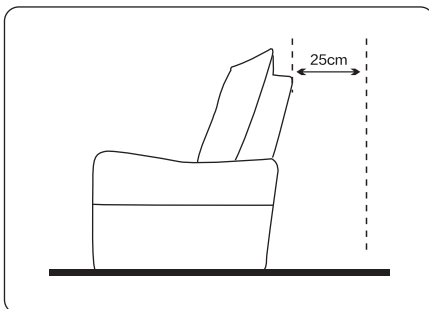


- הוציאו את כורסת העיסוי מהמארז ומקמו אותה במיקום המתאים בבית.
- אין למקמה במקום עם אור ישיר, ציוד חימום וכו'. הדבר עלול לגרום לשינויי צבע או התקשות של העור.
- כדי למנוע נזק לרצפה ולהפחית רעשים, אנא עטפו את כורסת העיסוי בבד ודברים אחרים.
- אנא וודאו שאין מכשולים לפני ומאחורי הכורסה (יש לשמור מרחק גדול מ-25 ס"מ מגב הכורסה).
- אל תמקמו במקומות לחים או אזורים בלתי מאוזנים.
- כדי למנוע הפרעות לאותות שידור, הרחיקו את הכורסה לפחות מטר אחד מטלוויזיה, רדיו וציוד אחר.


3. התקנת משענת הגב

- הוציאו את משענת הגב והמושב מהמארז החיצוני.



- לגב כורסת העיסוי מוצמדים סיכות ותוספות הפרדה. כל עוד תוספות ההפרדה בגב הבסיס מונסות עד הסוף, נשמע צליל בעת התקנה תקינה.

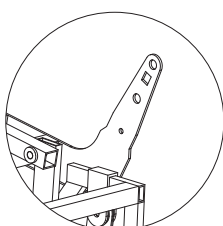

תוספים בגב ימין
ושמאל הכורסה

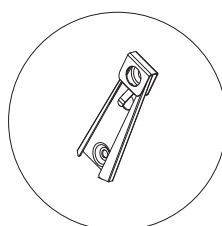


בורג בגב ימין
ושמאל הכורסה

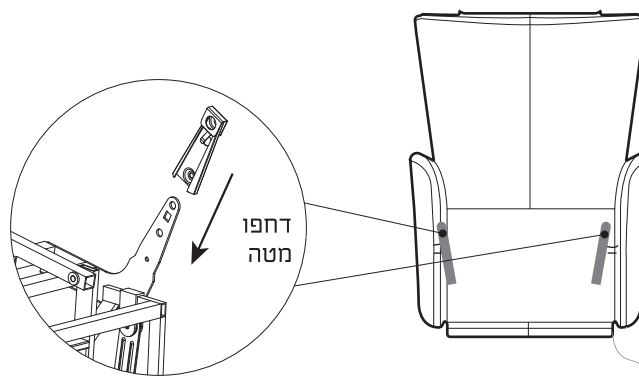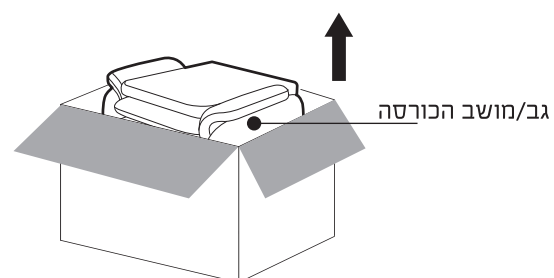




הגב שלך. המומחיות שלנו.


- חברו את התושבות הנוספות של משענת הגב לבסיס, הכניסו את תושבת צינור האוויר והתושבת הכפולה.
- הצמידו את גב המושב לבד; חברו את הסוגר שעל בד החציצה לקורה הצולבת של מסגרת המושב והתקינו את משענת הגב.

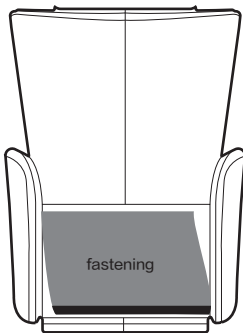


הידוק

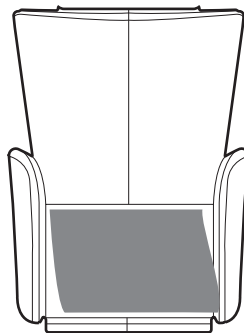

כפתור MAO

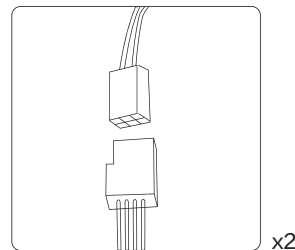


x2

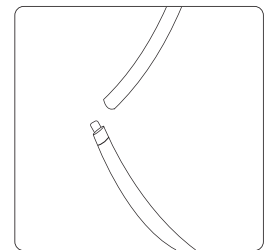

תושבת צינור אוויר

הזזת כורסת העיסוי


תחילה לחצו על גב הכורסה עם שתי הידיים ודחפו אותה לאחור. אדם אחד מלפנים ואחד מאחור להרמה והזזה.

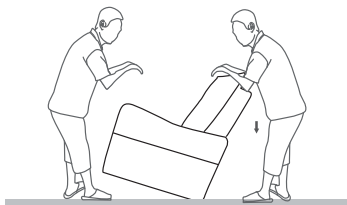


שימו לב

- אל תזיזו את כורסת העיסוי עם מישהו יושב עליה.
- הרצפה עלולה להינזק בעת הזזת כורסת העיסוי. מומלץ לשים כרית מתחת לכורסה.
- למניעת נפילה אנא אחזו בכורסת העיסוי בחוזקה בעת הזזתה.

מבנה המוצר

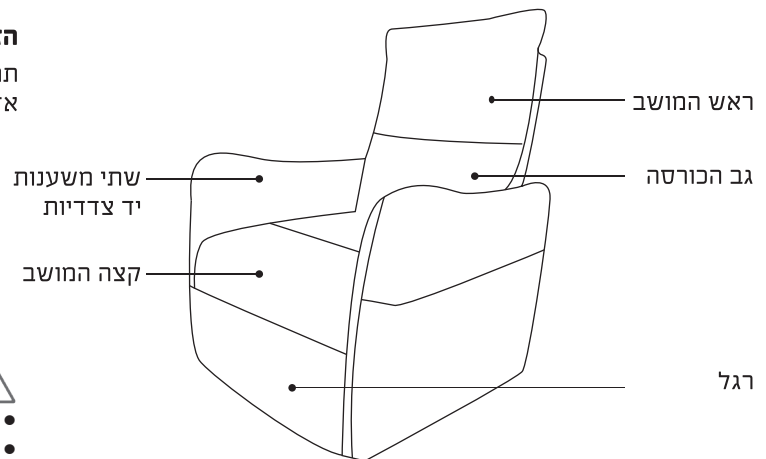

גב גוף כורסת העיסוי

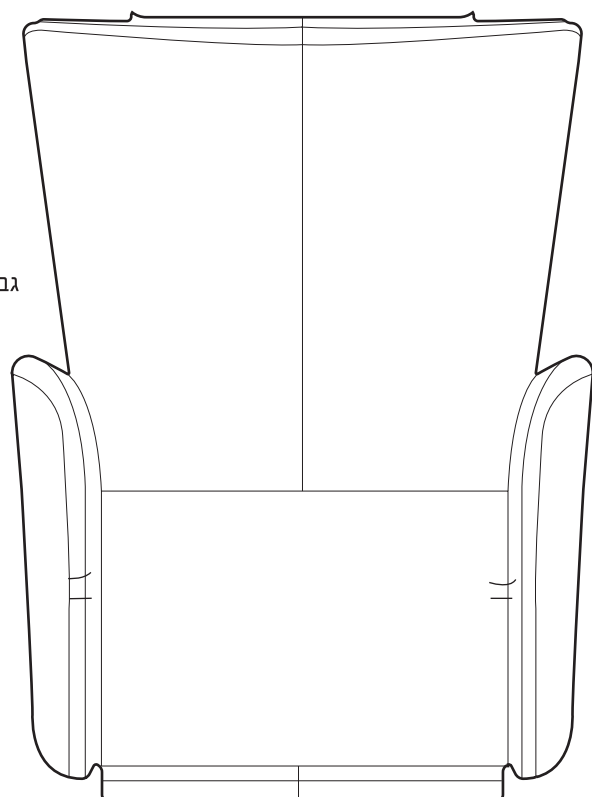



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

הוראות הרכבה ותפעול לכורסת עיסוי SUPERSTAR

תיאור פונקציות השלט הידני



⚠ שימו לב

- אל תשבו בכורסת העיסוי עם מכלול הרמת הרגליים מורם. הפעלת לחץ מידי על מכלול הרמת הרגליים, גורם נזק לחלקים.
- גרוע מכך, הכורסה עלולה להתהפך ולגרום לתאונה שתוביל לפציעה.
- לפני הישיבה בכורסת העיסוי, אנא וודאו שגב הכורסה זקוף, ולאחר מכן כווננו את זווית הטיית הגב בהתאם להעדפתכם.
- למניעת פציעה בלתי מכוונת, אין להכניס ידיים או חפצים זרים למרווחים בין המושב לגב הכורסה או בין המושב למכלול ההרמה. בעת התאמת הזווית, וודאו שאין מכשולים או חיות מחמד מאחור.
- הרימו או הורידו את גב המושב לפני מכלול הרמת הרגליים.

הפעלה/כיבוי

לחצו על לחצן זה, כורסת העיסוי נמצאת במצב המתנה; לחצו שוב, כל הפונקציות נעצרות, כורסת העיסוי מאופסת.



נדנוד חשמלי

לחצו על לחצן זה, כורסת העיסוי מפעילה את פונקציית הנדנוד החשמלי; ברירת המחדל היא נדנוד איטי. לחצו לחיצה למטה למצב רטט איטי, לחצו שוב, למצב רטט מהיר, לחצו לחיצה רביעית לכיבוי פונקציה זו.



הגדרת זמן

פונקציית התזמון מופעלת עם הפעלת המכשיר. ברירת המחדל היא 15 דקות, לחצו שוב להארכת הזמן ל-30 דקות, לחצו לחיצה שלישית לחזרה ל-15 דקות, וכן הלאה.



עיסוי רטט לרגליים

לחצו על לחצן זה כדי להפעיל את עיסוי הרטט לרגליים; לחצו שוב לכיבוי עיסוי הרטט לרגליים.



כדורי אזור העיסוי

לחצו על לחצן זה, כורסת העיסוי תפעיל את פונקציית העיסוי בכרית אוויר; ברירת מחדל עבור העיסוי בכרית אוויר הוא עיסוי לכל הגוף, לאחר מכן לחצו למעבר לכרית האוויר לעיסוי הצוואר והכתף, ולאחר מכן לחצו למעבר לכרית האוויר לעיסוי המותן, לחצו בפעם הרביעית לכיבוי פונקציה זו.



אזור חימום

לחצן זה מפעיל את פונקציית חימום כורסת העיסוי; ברירת המחדל היא חימום גוף מלא, ואז לחצו למעבר לחימום בגז של הצוואר והכתף, ולאחר מכן לחצו למעבר לחימום המותניים, לחצו על הכפתור פעם רביעית לכיבוי פונקציה זו.



אפס כבידה

לחצו על לחצן זה, כורסת העיסוי תפעיל פונקציית אפס כבידה שמדמה מצב של חוסר משקל של גוף האדם במרחב, כך שהגוף נמצא במצב טבעי ונוח, לשחרור לחץ פיזי ונפשי.




הגברת/הפחתת עוצמת עיסוי כרית האוויר

לחצו על מקש זה כדי להתאים את הגברת/הפחתת עוצמת עיסוי כרית האוויר; הסימן פלוס משמעו הגברה והסימן מינוס משמעו הפחתה. יש ללחוץ בכרית האוויר. תקף כאשר פונקציית האופנוע מופעלת.



הגבהת גב הכורסה

לחצו על לחצן זה כדי לכוון את גב המושב למעלה/למטה.

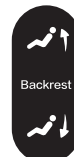

משתנים טכניים של המוצר

שם המוצר	כורסת עיסוי
דגם	SUPERSTAR AM-2015B
מתח מדורג	~ 100-240V
תדר מדורג	50/60Hz
הספק מדורג	88W
מידות המארז	880*760*645 מ"מ
משקל	נטו: 41 ק"ג. ברוטו: 52 ק"ג
עיצוב בטיחותי	Class II
ברירת המחדל של זמן העבודה של המוצר	15 דקות
תקן בטיחות	GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

פתרון תקלות

תקלה אפשרית	פתרון
נשמע צליל בהפעלה	זהו צליל העיצוב המבני במכשיר תקין
כורסת העיסוי מחוברת לחשמל אך לא פועלת	בדקו אם מקור ההספק תקין ומחובר. וודאו שכורסת העיסוי מופעלת במצב "1".
במהלך ההפעלה, הפקד פעיל, אך כורסת העיסוי לא פועלת	לאחר הפעלה ממושכת, כאשר טמפרטורת כורסת העיסוי גבוהה מדי, כורסת העיסוי עוברת אוטומטית למצב של הגנה נגד טמפרטורה, אנא כבו את המכשיר ואל תשתמשו בו במשך 30 עד 50 דקות כדי לאפשר למכשיר להתקרר.
במהלך ההפעלה הפקד לא פועל, וגם כורסת העיסוי מפסיקה לפעול	פונקציית תזמון אוטומטית לאחר ההפעלה. אם הזמן שהוגר הגיע, אנא השתמשו בפקד.
במקרה של תקלה, כדי למנוע תאונות, אנא הפסיקו את השימוש והוציאו את התקע. אם תיקון זה לא עזר, אנא פנו למרכז השירות.	



ניקוי

אין להשתמש בצמר פלדה, חומרי ניקוי שוחקים או נוזל מאכל (כגון בנזין או אצטון) לניקוי המוצר.

1. הוציאו את התקע משקע החשמל.
2. לניקוי כורסת העיסוי, השלט הרחוק וכבל החשמל השתמשו בבד יבש.
3. אין להשתמש במטלית רטובה או חומרי ניקוי.

אחסון

1. הוציאו את התקע משקע החשמל.
2. אחסנו את המוצר במקום קריר ויבש הרחק מאור השמש.
3. אל תפעילו לחץ כבד על מוצר זה.

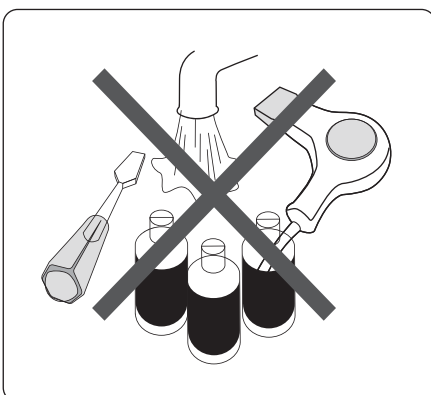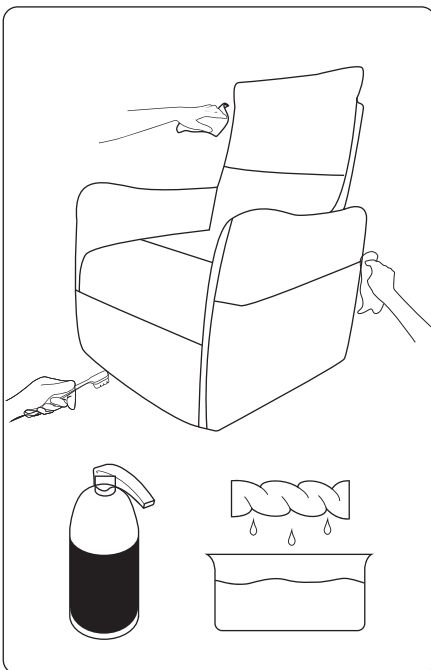

אם המארז פגום או קיים כשל מכני, אנא הפסיקו להשתמש במוצר זה ופנו למרכז שירות מורשה במדינתכם (אזורי) או למרכז שירות לקוחות.

אם המכשיר לא מופעל למשך זמן ארוך אנא נתקו את כבל החשמל!



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

תעודת אחריות

תודה שרכשת מוצר מתוצרת חברת ד"ר גב.

האחריות למוצר זה הינה לתקופה של שנה מיום רכישתו
ואינה תקפה עבור תקלות ונזקים שנגרמו ע"י שימוש לא נכון ו/או לא סביר.
האחריות הינה בתוקף כאשר היא מלווה במסמך המעיד על תאריך הרכישה.

חתימה וחתימת

מקום הרכישה

תאריך

קו הגב-מוקד המומחים
של ד"ר גב 03-9533111



משרדי הנהלה:

פארק לב הארץ, צומת קסם. תד 600, ראש העין, 48105 | טל. 03-9533111, פקס. 03-9511666 | drgav@dr-gav.co.il, www.dr-gav.co.il